

MANUEL UTILISATEUR

VENUS



CE



OFF CARR S.r.l. Via Dell'Artigianato II, 29 35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 Fax +39 049 9325734
offcarr@offcarr.com - www.offcarr.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENTS

- Lisez S'il vous plaît ce manuel soigneusement avant l'exécution de n'importe quelle opération sur les fauteuils roulants VENUS.
- Avant l'utilisation du dispositif vérifier l'arrivée en bon état du paquet (voir l'Emballage, transport, livraison et stockage dans ce manuel).
- Chaque fauteuil roulant est étiqueté d'un Numéro d'identification , l'adresse complète du fabricant et la marque de CE. Cette étiquette ne peut pas être enlevée pour une raison quelconque pour maintenir la traçabilité et les conditions générales de garantie du dispositif.
- Les fauteuils roulants Venus sont conçus et produits pour compenser un handicap physique dans le respect des exigences essentielles de la Directive Dispositif Médicaux 93/42/EEC EN . Selon avec la classification des produits de la susdite Directive, annexe IX, par. III. 1.1., le VENUS est classifié comme le dispositif médical non-envahissant de classe 1.
- On interdit l'utilisation du VENUS ou ses composants pour n'importe quel but d'autre que ceux indiqués dans ce manuel.
- Pour n'importe quels problèmes ou faute ou rupture informez s'il vous plaît immédiatement le distributeur agréé fournissant les indications suivantes :
 - A. Modèle
 - B. Numéro d'identification (sur l'étiquette dorée sur le cadre).
 - C. Description de Faute
- En cas de contact direct avec l'assistance du fabricant communiquez s'il vous plaît aussi :
 - A. L'Utilisateur nom et l'adresse complète
 - B. Nom et adresse de Négociant.

Emballage, transport, livraison et approvisionnement

Tout de fauteuils roulants OFF CARR sont expédié dans des caisses en carton fermées pour les protéger de coups et la poussière.

Le paquet inclut les fauteuils roulants de VENUS configurés selon votre demande, ce Mode d'emploi.

Le fauteuil roulant doit être transporté dans les camions qui le protègent d'agents atmosphériques, comme indiqué sur la caisse d'emballage.

À réception, vérifiez l'intégrité de la caisse et en cas des problèmes les notifier sur la lettre de voiture.

Ouvrez le paquet, enlevez le fauteuil roulant et vérifiez-le n'est pas plié ou griffé ou endommagé.
En cas des problèmes, notez votre remarque sur la lettre de voiture

1. DESCRIPTION DE PRODUIT

FAUTEUILS ROULANTS VENUS

Le VENUS est un fauteuil roulant orthopédique à cadre titane rigide ultraléger .

Les fauteuils roulants VENUS sont très polyvalents dans leurs divers configurations et une vaste gamme de réglages est disponible pour satisfaire n'importe quelles exigences de l'utilisateur.

Le repose-pieds peut être ajusté en hauteur avec précision et la plate-forme peut être choisie ouverte ou fermée selon le bon de commande.

L'axe de déverrouillage rapide des roues arrière permet de réduire le poids et le volume pendant le transfert.

Le dossier peut être plié en avant réduisant encore le volume, en tirant la corde(série) sur le derrière pour l'ouvrir.

Les fauteuils roulants VENUS sont assemblés et fournis selon vos choix à partir du bon de commande.

Consultez s'il vous plaît des Bons de commande de VENUS pour voir l'éventail d'options complet et les accessoires.

2. PRÉPARATION DU FAUTEUIL ROULANT

COMMENT PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT AVANT UTILISATION

Le fauteuil roulant est expédié avec les roues arrière détachées et le dossier replié.

Le dossier peut être déplié faisant tourner le dossier en arrière jusqu'à ce que le blocage épingle la fente dans leur logement sur le cadre . En tirant la corde sur la arrière pour sortir le blocage est possible de plier le dossier de nouveau.

Pour adapter les roues arrière au cadre, insérez l'axe dans support d'axe sous le siège en gardant le bouton appuyé.

Vérifiez si les roues sont correctement accrochées, en vérifiant si le bouton n'est plus enfoncé et en essayant un retrait des roues sans appuyer le bouton de l'axe.

Si le fauteuil roulant a besoin de nouveaux ajustements pour mieux satisfaire les exigences de l'utilisateur, contactez votre négociant ou d'autre personne qualifiée.


3. AJUSTEMENT D'INSTALLATION

3.1. AJUSTEMENT D'ASSIETTE

- L'inclinaison de siège peut être ajustée facilement agissant comme suit :

HAUTEUR ARRIÈRE


- Enlever la vis A de fixation de la barre de liaison du châssis (ou l'amortisseur);
- Augmenter (lever) ou baisser l'arrière à la hauteur demandée;
- Insérer et serrer la vis enlevée A;
- La barre (ou l'amortisseur) doit être perpendiculaire au sol. En agissant comme suit
- Enlever la vis B fixation de la barre (ou l'amortisseur) au siège;
- Déplacer la barre à une position perpendiculaire;
- Insérer et serrer la vis enlevée B.

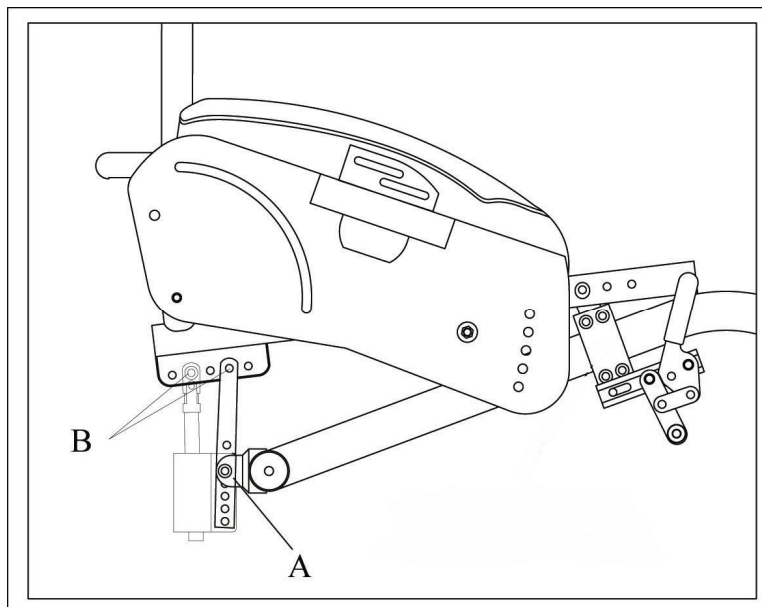

HAUTEUR AVANT

La hauteur avant peut être modifiée en changeant le block


- Choisir le block parmi trois tailles;

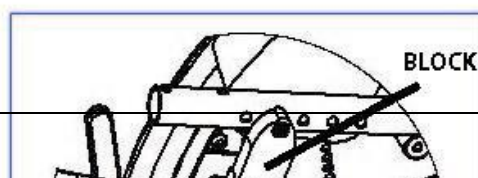

3.2. REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE

Obtenir un ajustement du centre de gravité est possible en modifiant la position de la assise sur le châssis.

- Retirer les vis B et C;
- Déplacer l'ensemble vers l'avant ou l'arrière;
- Remettre les vis et les serrer.
- La barre (ou l'amortisseur) doit être perpendiculaire au sol. Se reporter à la rubrique

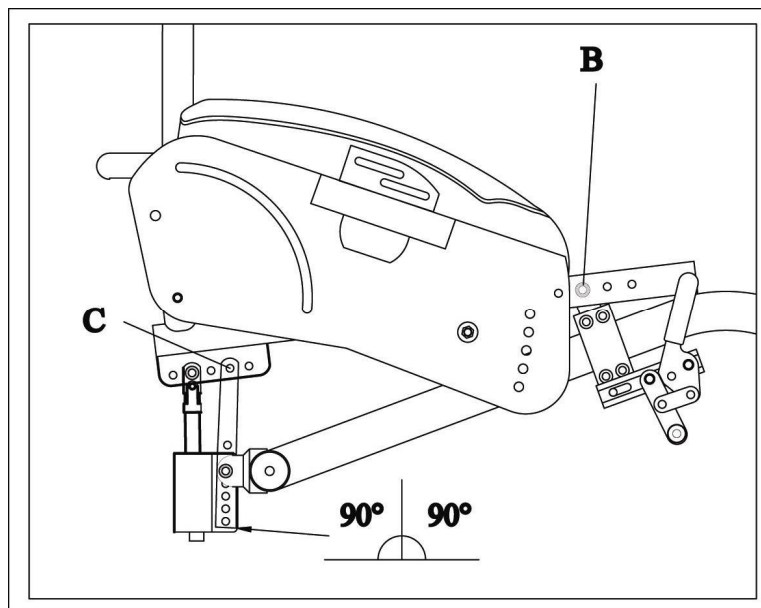


- ajuster ensuite la position des protégé-vêtements.

3.3. AJUSTEMENT DES PROTEGE-VÊTEMENTS

Il est possible d'ajuster la position des protégé- vêtements en fibre de carbone. Il peut être nécessaire si le pneu a été changé avec un profil différent :

- Dévisser les deux vis "A" la fixation de protégé- vêtements en fibre de carbone à la garde de côté d'aluminium;
- Changer la position des protégé- vêtements de fibre de carbone comme nécessaire;
- Prêter attention à ce que la distance entre le pneu et le protégé- vêtements doit être environ 1 cm ou moins;


- Visse correctement les deux vis "A".

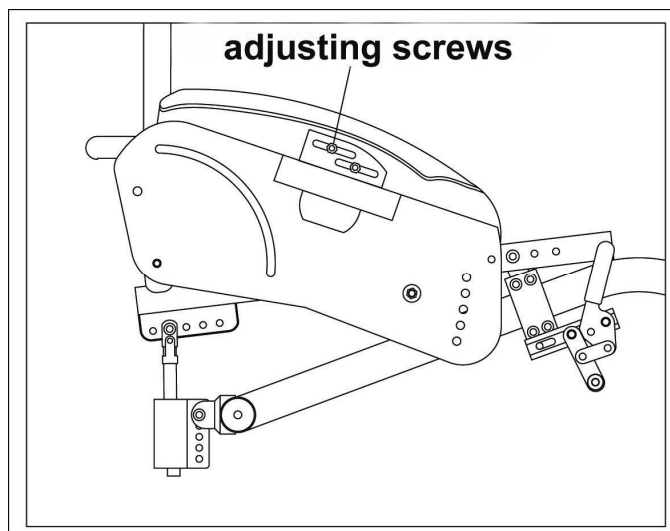

3.4. AJUSTEMENT D'INCLINAISON DE DOSSIER

Après une installation ou pour trouver une position de assise plus confortable, il est possible de changer l'angle de dossier :


- Desserrer et retirer l'écrou à fermeture automatique sous le cadre attribué "A";
- Desserrer et retirer la vis "A";
- Choisir la position la plus adaptée;
- Insérer et serrr correctement la vis enlevée.

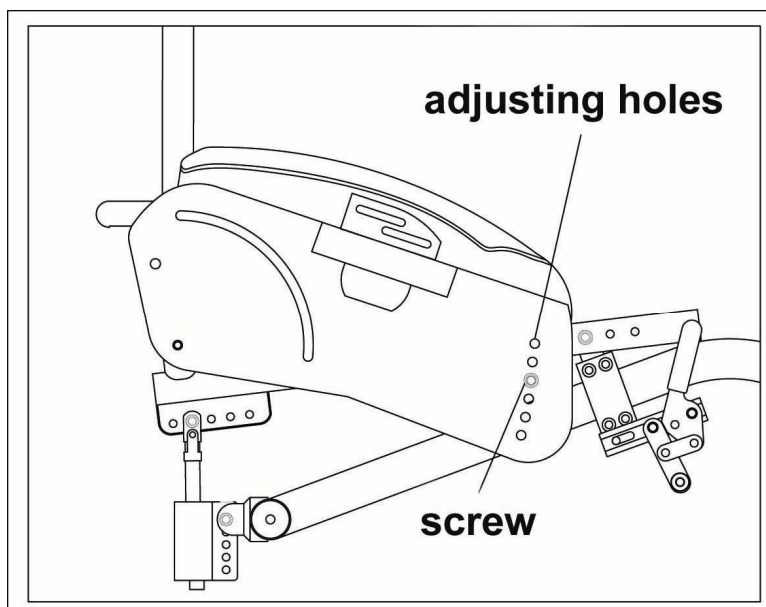

3.5. AJUSTEMENT DE TENSION DE DOSSIER

La tension de dossier peut être facilement ajustée par quelques courroies de velcro à l'intérieur de la toile .


- Soulever en haut le côté de devant de la toile de dossier.
- Tendre ou desserrer les Courroies de velcro selon votre besoin.
- Plier en bas la toile de dossier pour achever l'opération.

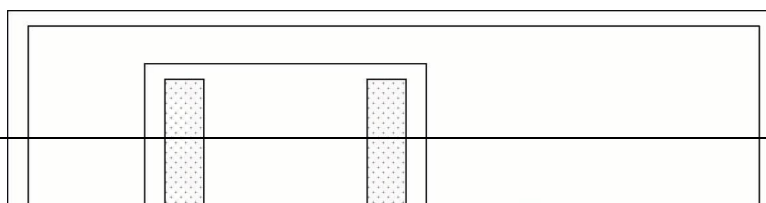

3.6. AJUSTEMENT DE HAUTEUR DE DOSSIER

A l'achat la hauteur de dossier a été choisie mais de nouveaux ajustements sont toujours disponibles :


- Soulever en haut le côté de devant de la toile de dossier;
- Enlever la vis et libérer les tubes de dossier;
- monter ou descendre les tubes selon avec votre désir (les tubes sont pré troué avec espace de 2 cm);
- Remplacer et serrer la vis A;
- Plier en bas la toile de dossier.

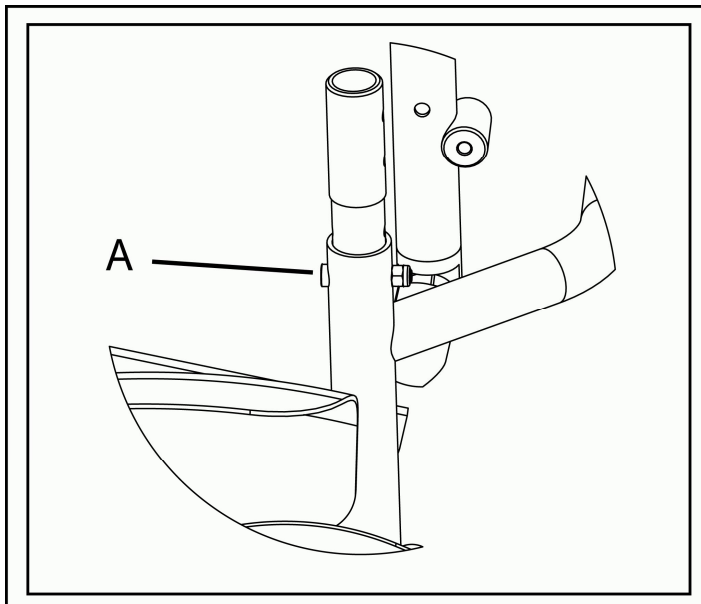

3.7 AJUSTEMENT DE HAUTEUR DE REPOSE-PIEDS

Le tube de repose-pieds glisse dans le châssis du fauteuil roulant et est serré par deux vis "C" derrière le cadre :


- Desserrer complètement les deux vis "A" et "B";
- Faire glisser le repose-pieds à la position juste;
- Serrer correctement les vis "A" et "B".

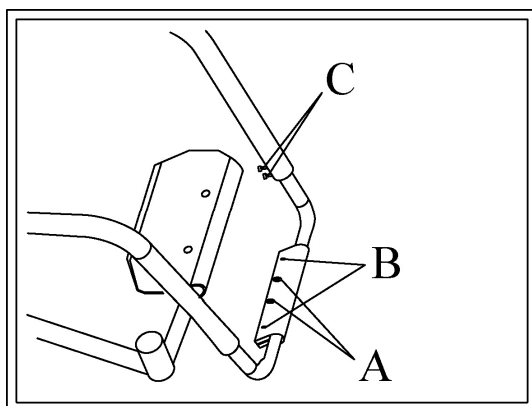

3.8. AJUSTEMENT DES FREINS

Vous pouvez ajuster la position de frein comme suit :

- Desserrer la vis "A";
- Faire glisser le frein à la position demandée;
- Serrer de nouveau la vis "A".

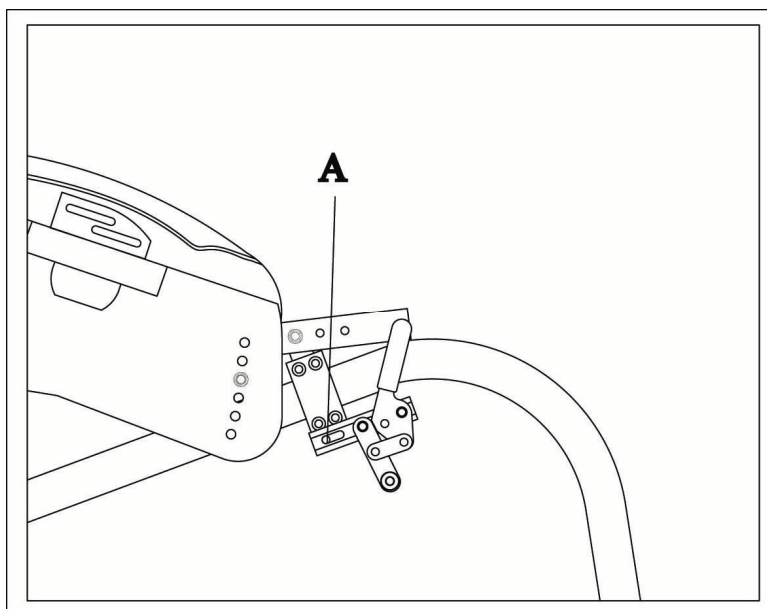

4. COMMENT UTILISER LE FAUTEUIL ROULANT

Pour une utilisation efficace du fauteuil roulant, consultez votre médecin ou d'autre personne qualifiée. Une utilisation appropriée et une maintenance périodique du fauteuil roulant aideront à conserver ses caractéristiques originales pour longtemps.

Les freins ne sont seulement des freins de stationnement, ne jamais les utiliser pour réduire la vitesse.

Si les pneumatiques n'ont pas la pression appropriée, les freins ne peuvent pas fonctionner correctement.

Le Venus fait partie des fauteuils roulants conçus pour des personnes très actives et selon la configuration choisie cela peut être extrêmement sensible. Dans ce cas l'utilisateur peut obtenir un fauteuil roulant très léger pour le propulser mais en même temps il y a risque de chute si l'utilisateur n'a pas un bon contrôle de son équilibre. Sur demande un dispositif d'anti-bascule pivotant approprié est disponible.

Évitez le contact du fauteuil roulant avec l'eau de mer et le sable. Dans ce cas, nettoyez le fauteuil roulant avec l'eau propre et séchez-le immédiatement pour éviter des dégâts au cadre.

Le fauteuil roulant est conçu pour le transport d'une personne. Ce n'est pas approprié pour d'autres utilisations.

NOTES

Gardez s'il vous plaît le fauteuil roulant loin du feu ou d'autres sources à haute température; Le fauteuil roulant est produit avec un matériau évalué pour éviter l'allergie et d'autres problèmes de peau. Si n'importe quel problème peut arriver lié au matériau ou à la peinture utilisée sur le fauteuil roulant, contactez s'il vous plaît un docteur et informez-en aussi OFF CARR.

La toile est lavable avec l'eau à 30 °.

On cela recommande toujours d'éviter l'immersion inutile de parties de cadre et tissu d'ameublement.

Inspections et maintenance

On cela recommande d'inspecter par semaine :

- La pression pneumatique. Vérifiez sur le côté du pneu est marqué la pression adaptée pour ce modèle particulier.
- L'efficacité de l'axe de déverrouillage rapide et si nécessaire ajouter peu de gouttes de lubrifiant entre l'axe et le support.
- La tension de dossier de la toile pour maintenir toujours la position la plus confortable.
- L'efficacité des freins.

Il est suggéré de vérifier tous les trois mois :

- Le serrage des vis de plaque de fourche avant.
- L'usure des roues avant.
- Le positionnement perpendiculaire des supports de fourches avant.
- L'efficacité du roulement à billes de roues de devant et arrière.
- Si nécessaire ajouter un certain lubrifiant sur des éléments se déplaçant.

On recommande de contacter le personnel expert et autorisé pour exécuter n'importe quelle opération de maintenance extraordinaire sur le dispositif.

5. TERMES DE GARANTIE

- 5.1. On garantit le cadre pendant trois ans de la date de livraison du fauteuil roulant.
- 5.2. Les parties soumises à l'usure normale ne sont pas couvertes par la garantie, à moins que l'usure ne soit causée par une faute industrielle.
- 5.3. La garantie ne couvre pas de transport.
- 5.4. Si une faute arrive pendant la période de garantie, OFF CARR fait :
 - a) Réparer la partie défectueuse
 - b) Remplacer la partie défectueuse
- 5.5. La garantie ne couvre pas de dégâts causés par la négligence, l'utilisation incorrecte, mal traitant ou la maintenance incorrecte par le personnel non autorisé ou par l'utilisateur.
- 5.6. OFF CARR n'est pas responsable de dégâts(de dommages et intérêts) causés pendant le transport. La société de transport est la seule responsable, donc informer s'il vous plaît tant société de transport que OFF CARR de n'importe quels dégâts qui a été causé par le transport.
- 5.7. Cette garantie ne couvre pas de blessure ou d'autres dommages finalement liés à un mauvais fonctionnement du fauteuil roulant.
- 5.8. L'étiquette de numéro d'identification ne doit jamais être enlevée du cadre de fauteuil roulant, autrement la garantie est périmée.

OFF CARR s.r.l. s'est réservé le droit de modifier ou améliorer le produit respectant sans avertissement la garantie désigne le rédacteur la disponibilité de pièce de rechange sur le de base des termes légaux italiens.

Le mode d'emploi est constamment monté la date(le rendez-vous) mais il est possible que quelques améliorations de dispositif ne soient pas toujours incluses dans ce manuel..